

rea[®]

Clematis[®] Pro

La referencia en el segmento de las
sillas de confort multiposición



Menos cizallamiento. Más confort

Con Tecnología DSS (Dual Stability System) integrada



Yes, you can.[®]

Diseño único

Nuestra Clematis Pro ha sido concebida para minimizar el cizallamiento y mejorar la redistribución de los puntos de presión con el fin de conseguir un confort óptimo.

Le Clematis Pro sigue siendo a la vanguardia de las sillas de ruedas de confort multiposición. Un estudio clínico reciente sobre los efectos de la basculación de asiento y reclinación de respaldo en las sillas de ruedas pasivas ha llegado a la siguiente conclusión: el uso conjunto del movimiento de basculación y reclinación permite conseguir un efecto positivo en el flujo sanguíneo y en la reducción de las presiones en la zona isquiática en pacientes geriátricos en posición sentada.

Dual Stability System

La tecnología DSS maximiza la estabilidad de la silla en posición reclinada o basculada. Integra Puntos de fijación altos para minimizar el cizallamiento de la piel.

Confort óptimo

Ajuste fácil y rápido para adaptar el respaldo a cada usuario. Tres opciones de respaldo: respaldo rígido, flexible o con cinchas ajustables en tensión para una estabilidad postural precisa.

Diseño compacto

Gran maniobrabilidad incluso en los espacios más reducidos. Autopropulsión & Maniobrabilidad mejorada gracias a la nueva posición de ruedas traseras más adelantadas.



› Clematis Pro E-Tilt

La Rea Clematis Pro E-Tilt ha sido concebida para ofrecer una mayor autonomía a los usuarios y acompañantes. Este modelo viene con basculación de asiento eléctrica de 25° de serie. Lleva reclinación de respaldo mediante pistón neumático pero este movimiento también puede ser realizado de forma eléctrica a través del mando (opcional). Puede conseguir más información sobre la Rea Clematis Pro E-Tilt en nuestra página web: www.invacare.es



› Respaldo modular

Sistema modular que permite elegir entre diferentes tipos de respaldos: rígido, flexible o ajustable en tensión, según las necesidades del paciente.



› Dispositivo Antivuelco

Probado de forma rigurosa, ayuda al acompañante a levantar la parte delantera de la silla para sortear obstáculos (acera, pequeños escalones), con más facilidad.

NUEVO

1



Mayor rigidez

Soporte de ruedas traseras reforzado

2



Maniobrabilidad incrementada

Posición de ruedas traseras más activa



> Respaldo reclinable

- Reclinación a 30°
- Basculación de asiento a 25°
- Reposapiernas ajustables en ángulo 0° a 75°
- Puntos de fijación altos para minimizar el cizallamiento de la piel

E-Tilt
30°

(25° en posición estándar)



3



Anchura de asiento adicional 540 mm

Mayor elección



— 390 - 540 mm —



› Reposapiernas ajustables en ángulo

Permiten elevar las piernas para incrementar confort y posicionamiento cuando la silla está basculada o reclinada. Soportes pantorrilla multiajustables. Paletas ajustables en altura, profundidad y anchura como estándar.

Accesorios & opciones



› Matrx Contour Visco NG

Estándar en la versión configurada. Cojín anatómico de alta resiliencia, 100% visco. Maxima estabilidad & redistribución de las presiones.



› Almohadilla concava

Moldeada por inyección, ofrece mayor sujeción del antebrazo. Parte trasera elevada para evitar el deslizamiento de los codos.

Lista de accesorios disponible en el catálogo de opciones REA

* Estudio clínico completo (Wheelchair tilt in space and recline functions-Influence on seat interface pressure and ischial blood flow in an elderly population). Roland Zemp

<https://www.invacare.es/es/help-support/estudios-clinicos-invacare>

Diseño & Confort Clematis® Pro

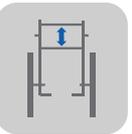
Nuestra nueva Rea **Clematis®** Pro ha sido diseñada para ofrecer a los usuarios una experiencia de conducción y de confort única.

Su chasis compacto permite una maniobrabilidad óptima, especialmente en interiores. Las ruedas traseras están situadas en una posición más avanzada para garantizar un acceso facilitado a los aros para los usuarios que se autopropulsan.



Datos Técnicos*

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	 Anchura asiento ▼	 Profundidad asiento ▼	 Altura asiento ▼	 Altura respaldo ▼	 Altura reposabrazos ▼
Clematis Pro	390/440/490/ 540 mm ⁽¹⁾	420 - 480 mm ⁽²⁾	400 - 450 mm	570 - 710 mm	230 - 350 mm
Clematis Pro E-Tilt	390/440/490/ 540 mm ⁽¹⁾	430 - 500 mm			

	 Regulación de los reposapiés ▼	 Ángulo de asiento ▼	 Reclinación de respaldo ▼	 Anchura total ▼	 Altura total ▼
Clematis Pro	355 - 465 mm	0° - 25°	0° - 30°	AA+200 mm	Máx. 1200 mm
Clematis Pro E-Tilt	355 - 465 mm	0° - 30°	0° - 30°	AA+220 mm <small>(freno tambor)</small>	Máx. 1200 mm

	 Largo total con reposapiés ▼	 Peso total ▼	 Peso máx. usuario ▼	 Peso de transporte ▼	 Pendiente máxima con frenos de estacionamiento ▼
Clematis Pro	1060 mm <small>(Rueda de 24")</small>	A partir de 37,5 kg	135 kg	A partir de 20 kg	7°
Clematis Pro E-Tilt	1040 mm <small>(Rueda de 12")</small>		135 kg	A partir de 25 kg ⁽³⁾	7°

¹⁾ Anchuras 390/440/490 mm incluyen ensanchadores de reposabrazos 100 mm en cada lado.

Anchura 540 mm: reposabrazos con soporte doble y chasis ajustable como estándar.

²⁾ 430 - 500 mm con anchura 540 mm

³⁾ Incluye batería

Rea y DSS (Dual Stability System) son marcas registradas de Invacare® International. Rea Clematis Pro ha sido diseñada con sistema DSS (Dual Stability System). Garantiza mayor estabilidad y seguridad para el usuario en fases de cambios posturales: basculación de asiento y reclinación de respaldo.



Tapizado



Color chasis

Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
 Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª
 46001 Valencia
 España



© 2022 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Invacare Clematis Pro - ES - 04/2022

